


Skrócona instrukcja użytkowania Aparatu RGAméd



Program 1- stosuje się do przeprowadzania terapii informacyjno-falowej (IFT).

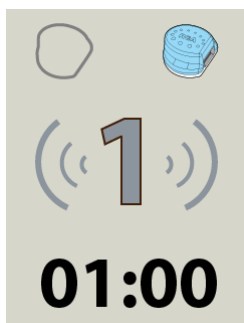

Czas pracy urządzenia w programie (IFT) trwa 1 minutę.

Jak funkcjonuje program 1-szy ?



Promiennik odczytuje informacje z danego obiektu, zapisuje je i oddaje. Metoda ta oparta jest na wykorzystaniu wtórnych nośników informacji w kryształach, mogących stworzyć spektralny anagram fal milimetrowych . Do przeprowadzenia tego typu terapii kryształ umieszcza się płaską, pracującą powierzchnią na dane miejsce, na przykład na podskórny meridian , albo na miejsce bezpośrednio bolące, lub rzut narządu na skórze (np. rzut żołądka, wątroby, serca itp.) Następnie uruchamia się program 1 i w ciągu 1 minuty, aż do automatycznego wyłączenia urządzenia.

W tym czasie na kryształ zostaje zapisane promieniowanie i tworzy się przestrzenny obraz miejsca, nad którym znajduje się kryształ. Dostrojenie kryształu odbywa się automatycznie. Po zakończeniu zapisu na kryształ, czyli po samoczynnym wyłączeniu się aparatu, odłączamy promiennik od przewodu łączącego z urządzeniem i mocujemy go plastrem lub opaską, na miejscu dokonania zapisu.

Kryształ (IFT) z zapisaną informacją będzie funkcjonował już automatycznie. Membrana znajdująca się w kryształce zaczyna przetwarzać i generować dostarczoną informację w obrazie nisko-intensywnych fal elektromagnetycznych, których działanie jest terapeutyczne dla człowieka. Przy działaniu fal milimetrowych, oddziałujących na podskórne przenikanie, następuje niszczenie mikroflory, która tą chorobę wywołała. Komórki ciała człowieka poddane działaniu tego urządzenia, otrzymają impuls do prawidłowego ich funkcjonowania. Komórki pod wpływem promieniowania milimetrowego stają się bardziej odporne. W razie wystąpienia nagłego bólu, terapia falami milimetrowymi odnosi nieporównywalne skutki w postaci natychmiastowego ustąpienia bólu albo jego znacznego złagodzenia.

Miejsca do zamocowania kryształów, po odłączeniu ich od aparatu:

- na symetrycznych częściach ciała,
- na pojemniku z wodą strukturyzowaną,
- na segmentowej części kręgosłupa,
- na punktach akupunkturowych odpowiadających organom wewnętrznym, w zależności od danej choroby.
- w miejscu skąd zapisaliśmy informacje
- w rzucie tętna

W razie potrzeby informacje można zapisać na dwa kryształy i zamocować w dwa różne miejsca ciała. Jeden kryształ np. umieszcza się w miejscu, z którego informacja była odczytana, a drugi na głównych arteriach krwionośnych. Dodatkowo można przygotować wodę do której wprowadzono informację, zapisaną na kryształce i taką wodę popijać w ciągu dnia.

Czas stosowania

Czas oddziaływania zwrotnego: od 15 minut do 3 godzin. Przy przewlekłych bólach (na przykład ból stawów wywołany przez artretyzm zapisany kryształ należy przyłożyć w miejscu bólu, na okres do 12-24 godziny.

Ważnym warunkiem efektywnego oddziaływania aparatem, jest możliwość powtórnego zapisu z miejsca patologicznego schorzenia. W stanach ostrego zapalenia, zapisywania informacji dokonuje się kilkakrotnie, co 30 min (ból gardła, ostry katar, bóle urazowe), w stanach przewlekłych wystarczy zapis Programem 1 wykonywać 1-2 razy na dobę.

Program 1 stosuje się w następujących przypadkach:

- dla zapisu informacji na kryształach z wydzieliny, bądź wydaliny biologicznej organizmu takiej, jak mocz, ślina, łzy, kał, ropa z rany, śluz z nosa, śluz z pochwy itp.), po czym, informacje przenosi się na zrestrukturyzowaną wodę, którą popija się w celach leczniczych lub stosuje do przemywania. Tą metodą można utworzyć bardzo skuteczny rodzaj „leku” o działaniu podobnym, jak szczepionka wodna przeciwko np. katarowi, grypie lub przeciwko innym, niebezpiecznym chorobom wirusowym,
- dla zapisu informacji z leków, z przeniesieniem tej informacji w miejsce pulsu, na wodę albo na cukier, dla uzyskania elektronicznej kopii danego preparatu. Taką metodę stosuje się w przypadkach, gdy pacjent ma alergię na dany lek lub, gdy wiemy, że lek ma silne właściwości toksyczne.

Właściwości programu 1-go aparatu:

W ciągu 1 minuty gdy urządzenie działa w 1 programie, na półprzewodniku informacyjnego kryształu, powstaje elektroniczna kopia zapisanego miejsca lub obiektu. Może to być miejsce stanu patologicznego, miejsce dotknięte urazem, miejsce odpowiedzialne za odporność, naczynie limfatyczne, biologiczne wydzieliny i wydaliny, leki, itd...

Po automatycznym wyłączeniu urządzenia (po 1 min), automatycznie zaczyna się odtwarzanie zapisanego milimetrowego zapisu, uaktywniającego system immunologiczny i polepszającego cyrkulację krwiobiegu i mikrokrwiobiegu, w kierunku miejsca chorobowo zmienionego.


Atutem działania programu 1, jest bardzo niskie zużycie energii na roboczej części kryształu, pracującego w automatycznym trybie emitowanych fal, nie

większy, jak 10mkW, co pozwala uniknąć nadwerężenia mikro-cyrkulacji krwi, w chorobowo zmienionym miejscu.

Bardzo ważną cechą programu 1 jest uzyskanie elektronicznej kopii problematycznego miejsca i przeprowadzenie uzdrawiających zabiegów kryształem zawierającym te informacje, na odkrytej części ciała, w miejscach położonych symetrycznie (np kończyny), albo na arterii krwionośnej, w przypadku, gdy miejsca te są chorobowo zmienione, jak przy wrzodach, otwartych ranach, poparzeniach, otwartych naczyniach krwionośnych, opuchliznie, nagłym bólu, itd...

Program 1 aparatu, ma możliwość nagrania informacji z różnych płynów ustrojowych i przenoszenie jej na wodę, którą później można używać w celach uzdrawiających do przemywania, płukania, albo do picia. Pozwala to przeprowadzić zabiegi w miejscach niedostępnych takich, jak oczy, cewka moczowa, pochwa itp...

Program 2

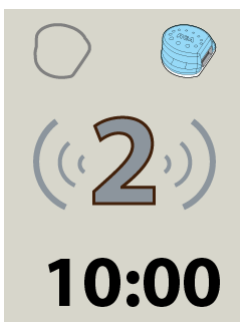

Czas pracy urządzenia w programie - 10 min.

Program stosuje się w następujących przypadkach:

- Działanie falami milimetroowymi z możliwością używania kryształów do strukturyzacji wody.
- Działanie w programie 2 stosuje się w projekcji na organy wewnętrzne, układ krwionośny, płuca, punkty stymulujące na powierzchni ciała będące odpowiednikami organów wewnętrznych, otwarte rany, poparzenia, bolące miejsca, punkty biologicznie aktywne, receptory na dłoniach i stopach.

Ogólny czas zabiegów Programem 2 to 30min na dobę.

Cykl oddziaływania obejmuje 10-15 procedur kilkuminutowych, lub 2-3 dziesięciminutowe, przeprowadzane codziennie. W razie potrzeby procedury powtarza się przez 1-3 tygodnie, z zastosowaniem dwutygodniowej przerwy przed kolejną ich sesje.

Wskazania do stosowania terapii Programem 2

- zespół chronicznego zmęczenia
- częste choroby przeziębieniowe
- choroby układu sercowo-naczyniowego: choroba nadciśnieniowa i hipotonia, tromboflebit, żylakowe rozszerzenie żył i in. choroby oskrzeli i płuc: bronchit, kaszel, angina, tonzylite, przewlekłe zapalenie gardła, zapalenie płuc, polipy w nosie, założenie nosa, zapalenie zatok przynosowych i zapalenie zatoki czołowej i inne.
- choroby jamy ustnej: ból zębów, zapalenie jamy ustnej, parodontoza, ślinotok i inne.
- choroby narządów trawiennych: mdłości, wymioty, spazm przełyku, zgaga, choroby przełyku, choroba wrzodowa, rozwolnienie, nieżyt żołądka, cukrzyca, hemoroidy, choroby wątroby i inne.
- choroby układu moczowo płciowego: anuria, zapalenie gruczołu krokowego, ból w okolicach prącia, nerwice seksualne i inne.
- choroby ginekologiczne: klimakterium, zapalenie gruczołu sutkowego, przewlekła choroba macicy, zapalenie jajników i inne.
- choroby ucha: zapalenie ucha, zapalenie ślinianki przyusznej i inne.
- choroby oczu: zapalenie rogówki oka, zapalenie spojówek, katarakta, glaukoma, wylew krwi do siatkówki i inne.
- choroby układu nerwowego: zapalenie korzonków nerwowych, nerwoból międzyżebrowy, uszkodzenie splotu ramiennego, skurcz palców przy pisaniu i inne.


- nerwice: migrena, depresja, spadek nastroju, bezsenność, senność, alergie i inne.
- choroby narządów ruchu: naruszenie sprawności ruchowej i czuciowej kończyn, ochłodzenie kończyn, artretyzm i inne.
- choroby skóry: świerzb skórny, egzema i neurodermit, czyraki, łuszczyca i inne.
- różne inne choroby: podwyższona temperatura ciała, grypa, gorączka, bóle fantomowe, zatrucie czadem, drgawki dolnych kończyn, skurcz i paraliż mięśnia łydki i inne.

Przeciwwskazania:

- dzieci do 4 lat. Jeżeli dzieckiem zajmuje się lekarz, to terapię można prowadzić nawet u noworodków
- ciąża
- posiadanie rozrusznika
- padaczka
- ostre bóle chirurgiczne
- wrodzony niedorozwój centralnego układu nerwowego
- hemoroidy
- bezpośrednie oddziaływanie poprzez powiekę, na gałkę oczną.

Aparat RGamed posiada dwa promienniki (kryształy) koloru niebieskiego. Pracująca powierzchnia kryształu jest płaska i zaznaczona jasnym lub brązowym kwadracikiem.

Program 3-ci, to program anty-pasożytniczy i antywirusowy

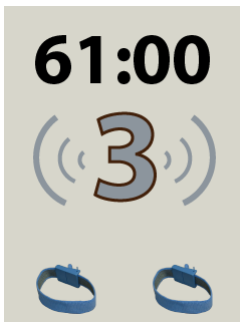

Czas pracy aparatu w 3 programie: 61 min.

W dolnej części urządzenia, znajdują się dwa gniazda wtykowe do podłączenia przewodów i bransoletek używanych tylko w programie nr 3.

Program stosuje się do przeprowadzenia zabiegu anty-pasożytniczego, impulsami elektromagnetycznymi. Ten program posiada także właściwości przeciwzapalne. Czas pracy 3 programu to 61 minut, łącznie z przerwami (7-20-7-20 -7).

Program 3 pozwala oczyścić organizm z pasożytów, wszy, kleszczy, grzybów, wirusów, bakterii jednokomórkowych i innych mikroorganizmów patogenicznych. Metoda ta oparta jest na oddziaływaniu impulsami elektromagnetycznymi o częstotliwości 30+/-2kHz.

Częstotliwość 30 kHz odkryta została przez uczoną kliniczną H. Clark i okazuje się częstotliwością uruchamiania chemicznych reakcji w mitochondriach organizmu (centra oddychania) chorych komórek, mikroorganizmów i pasożytów.

Działanie impulsów elektromagnetycznych o częstotliwości 30kHz, okazało się zabójczym dla każdego rodzaju pasożytów!

Instrukcja do przeprowadzenia zabiegów:

Zabiegi należy przeprowadzać 1-3 razy dziennie. Zaleca się przeprowadzić cykl 30 zabiegów w okresie od 1 do 4 tygodni, a następnie zastosować przerwę 7 dni. Takie cykle stosuje się do momentu ustabilizowania stanu zdrowia, albo do ustąpienia oznak chorobowych. Pacjentowi stosującemu zabiegi, zaleca się w ciągu doby wypijać dostateczną ilość czystej,

zrestrukturyzowanej wody, do której dodaje się informację odczytaną z moczu, lub kału, dla przyspieszenia wydalania z organizmu mikroorganizmów i pozostałości z ich rozpadu.



Informacje i sprzedaż urządzeń:

www.SkarbnicaZdrowia.pl

e-mail: info@skarbnicazdrowia.pl

tel.: 727 989 727